

Worklist não inicia exame — FUJIFILM FDR-3000AWS

Unidade CDT — Maricá/RJ · Subsídio técnico para o serviço FUJIFILM

Reunimos aqui o que encontramos ao investigar por que a worklist não inicia os exames neste equipamento: os **achados, as evidências e de onde cada uma veio** (arquivos do próprio console e a documentação consultada). A intenção não é dizer como configurar — e sim entregar à **equipe técnica da FUJIFILM** o material necessário para analisar e ajustar o equipamento.

Equipamento: FUJIFILM FDR-3000AWS

Estação (hostname): AH57024557

Modalidade: Mamografia (MG)

Software: Mainsoft V9.3 (perfil AWS V4.2)

AE Title local: FDR-MAMO (IP 10.1.92.177)

Serviços: Modality Worklist (MWL) + MPPS

ACHADO PRINCIPAL

A worklist chega e os exames aparecem na lista — mas o exame não inicia (erro **31027**). Tudo aponta para o mesmo ponto: o console **não acha um menu de exposição que corresponda ao código de procedimento da ordem**. A tabela que faria essa tradução — “**código de procedimento (JJ1017 Ver. 3) → menu de exposição**” (`JJ1017V3CodeMapping`) — **está vazia** (0 registros) e datada da instalação (2018), ao passo que o cadastro de menus de exposição (`MenuData`) está lá, presente e atualizado. Some-se a isso que **não há destino de MPPS** declarado na tabela de roteamento do console.


- 1. Sintoma e reprodução
- 2. Registros de erro
- 3. Fluxo de processamento (reconstruído)
- 4. Evidências por arquivo
- 5. Cadastro de menus observado
- 6. Configuração de rede observada
- 7. Auditoria das bases de configuração
- 8. Comportamento do RIS/PACS
- 9. Referências consultadas

1. Sintoma e reprodução

- A consulta de worklist (C-FIND, modalidade MG) é respondida e os exames **aparecem na lista** do console.
- Ao selecionar o exame e **iniciar**, é exibido o erro **31027** (“Falhou a operação de obter informações de imagem”), com instrução para contatar o serviço técnico e desligar o sistema.
- A **aquisição manual** (sem worklist), em que o operador seleciona o menu de exposição na tela, ocorre normalmente.

2. Registros de erro

É o que o equipamento mostra ao operador no momento de iniciar o exame — a mensagem na tela do console e, por trás dela, o registro correspondente no **Visualizador de Eventos do Windows** da estação:

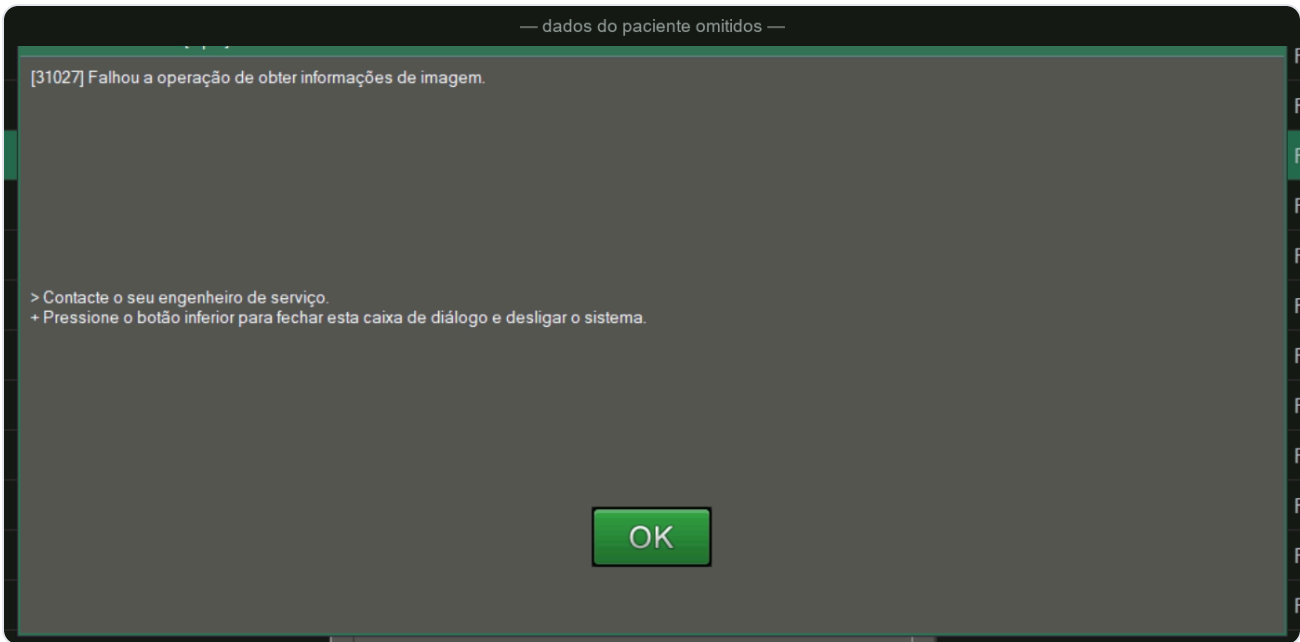

Mensagem exibida no console ao iniciar o exame pela worklist (cabeçalho com dados do paciente tarjado).

Fonte (Provider)	EventID	Conteúdo registrado
FFIipInput	13060	Falha na rotina interna <code>GetStudyInfo</code> ; dado de evento: <code>IdExposureList</code> , <code>GetStudyInfo-100</code> , retorno <code>1</code> — a lista de exposições não pôde ser montada.
FFCustomMessageBox	31027	"Falhou a operação de obter informações de imagem. Contacte o seu engenheiro de serviço."

No fundo, é sempre a mesma história: `GetStudyInfo` não consegue a `IdExposureList` → cai no 31027. É esse fio que as evidências a seguir puxam.

3. Fluxo de processamento da worklist no console (reconstruído)

Com base nos arquivos de configuração do próprio console (seção 4) e na documentação (seção 9), o encadeamento ao iniciar um exame por worklist é:

1. Console consulta a worklist em WORK-CDT (C-FIND, Modality=MG, ISO_IR 100).
 2. Lê do item: Scheduled Procedure Step Sequence (0040,0100)
 - > Scheduled Protocol Code Sequence (0040,0008)
 - > Protocol Context Sequence (0040,0440) [JJ1017 Ver.3]
 3. TRADUZ o código JJ1017 (JJ1017-M / JJ1017-S) -> código de menu FCR, via a tabela JJ1017V3CodeMapping.

4. Com o código FCR, localiza o menu em MenuData (ExaminationMenu / ExposureMenu).
5. Monta a lista de exposições (IdExposureList) e inicia o exame.

A falha registrada (IdExposureList não obtida no passo 5) é coerente com a ausência de correspondência no passo 3 — detalhada na seção 4.

4. Evidências por arquivo (configuração do console)

Arquivos examinados sob ...\\FujiFilm\\IIP\ (cópias em \\Config\ e \\AWS\):

Arquivo / Tabela	Evidência constatada
JJMenuCodeMapping.mdb → JJ1017V3CodeMapping (colunas: ID, FCRCode, JJCode-16M, JJCode-16S, Update)	0 registros (tabela vazia) , nas duas cópias presentes (IIP\\Config\ e IIP\\AWS\\User\). Ambos os arquivos datados de 2018-11-16 (data de instalação), sem alteração posterior.
MWMTagSetting.mdb → UserMapping	O atributo Scheduled Protocol Code Sequence (0040,0008) e seu Code Value (0008,0100) estão marcados como requeridos (RQFlag = True , Enabled = 1) no processamento do item de worklist.
MWMConfig.mdb / .def → DicomCustom, ImageList07	O campo de menu (MenuName) é derivado de 0040,0100 > 0040,0008 > 0008,0100 (Scheduled Protocol Code > Code Value). Há 55 regras em DicomCustom , incluindo entradas “[AWSV4.2] JJ1017Ver3 Protocol Context SQ” que mapeiam 0040,0008 > 0040,0440 (Protocol Context Sequence).
JJ1017FRisDef.inf	Define a estrutura do código como JJ1017-M e JJ1017-S (versão 3.x), transportada em Protocol Context Sequence (0040,0440) (esquema DCM , conceito 123016 “Imaging Conditions”). Compatível com as colunas JJCode-16M / JJCode-16S da tabela vazia.
MenuData.mdb → ExaminationMenu / ExposureMenu	Presente e populado (cópia ativa em IIP\\AWS\\User\ modificada em 2026-06-16). Contém os menus exibidos na tela com seus códigos (seção 5). Confirma que os menus existem; o que falta é a <i>tradução</i> a partir do código da worklist.
MassOrder.mdb → MassOrderMenu / PreSetMenu	Ambas vazias (0 registros) — tabelas de menu/pré-seleção de ordem também não populadas.
NetConfig.mdb → ConnectInfo / DeviceInfo	ConnectInfo contém MWM → WORK-CDT e ROUXINOL (store) → PACS-CDT ; não há entrada de PPS (MPPS) . Detalhe dos nós na seção 6.

DicomPpsTag.mdb → Pps	10 tags de MPPS definidas (Group/Element/VR/Name) — porém sem destino correspondente em ConnectInfo .
IIP\Data\Image\ROUTINE*.INF (estudos previamente adquiridos)	Confirmam os códigos de menu reais gravados pelo equipamento: AcqDeviceProcessingCode (0018,1401)=0349 (menu CCD), AnatomicRegion (0008,2218)=T-04000/SNM3 “Breast” , ViewCodeSequence (0054,0220)=R-10242/SRT “cranio-caudal” . (Dados de paciente omitidos deste relatório.)

5. Cadastro de menus observado (MenuData → ExaminationMenu)

Menus de estudo cadastrados (coluna Code / NameSbcs), correspondentes às telas de seleção do console:

Code (ExaminationMenu)	Menu (tela)
FCR0329-00	MAMO BILATERAL
FCR0329-01 / FCR0329-02	MAMOGRAFIA E / MAMOGRAFIA D
FCR0321-00 / FCR0321-01	UNILATERAL D / UNILATERAL E
FCR0339-00	MAMMOGRAPHY MLO
123	MAMO PROTESE (código curto / customizado)

Exposições individuais (ExposureMenu , com MpmCode): FCR0349-0001 / 0349 = CCD, FCR0349-0000 = CCE, FCR0359-0001 / 0359 = MLOD, FCR0359-0000 = MLOE, entre outras. O código 0349 coincide com o AcqDeviceProcessingCode gravado nas imagens reais (seção 4).

6. Configuração de rede observada (NetConfig → DeviceInfo / ConnectInfo)

Função (ConnectInfo)	AE Title	IP : Porta	Papel / Sintaxe
MWM (worklist)	WORK-CDT	104.236.203.40 : 11112	SCP · Implicit VR LE · Modality Worklist FIND
ROUXINOL (armazenamento)	PACS-CDT	104.236.203.40 : 11112	SCP · Implicit VR LE · MG Storage + Verification
READER	FDR-3500DR	192.168.0.101 : 104	Detector local

(AE local do console)	FDR-MAMO	10.1.92.177	SCU · Print / Storage / Verification
PPS / MPPS		Sem entrada em ConnectInfo (nenhum destino de MPPS declarado)	

Os nós de worklist e de armazenamento estão declarados e correspondem ao servidor da instituição.

7. Auditoria das bases de configuração

Foram abertos e inventariados **51 arquivos** `.mdb` do console. Pontos relevantes ao caso:

- `JJ1017V3CodeMapping` : **0 registros** em ambas as cópias (Config e AWS\User), datadas de 2018.
- `MassOrderMenu` e `PreSetMenu` : **0 registros**.
- `MenuData` (ExaminationMenu/ExposureMenu/SetMenu): **populado e atualizado** (2026-06-16).
- `DicomPpsTag` → `Pps` : 10 tags definidas; sem destino em `ConnectInfo` .
- `NetConfig` → `DeviceInfo` : nós de worklist/armazenamento corretos.

8. Comportamento observado do lado RIS/PACS

PARÂMETROS DO ITEM DE WORKLIST ENTREGUE PELO SERVIDOR DA INSTITUIÇÃO

Serviço	Modality Worklist FIND (C-FIND), respondido com status 0000 (Success)
Transfer Syntax	Implicit VR Little Endian (1.2.840.10008.1.2)
Specific Character Set	ISO_IR 100 (Latin-1)
Modality (0008,0060)	MG
Identificadores	Accession / Requested Procedure ID / SPS ID com ≤ 10 caracteres
Study Instance UID	Único por exame
Dados do paciente	Nome, ID, nascimento, sexo e <i>Issuer of Patient ID</i> preenchidos
Scheduled Protocol Code	Em apuração — depende do código a ser reconhecido pelo console (ver seções 3–4)

Variações testadas do lado do RIS (conjunto de caracteres, formato/tamanho de identificadores, formato do Study UID, data agendada) **não alteraram** o comportamento, o que é consistente com as evidências das seções 3–4.

9. Referências consultadas

Referência	Trechos pertinentes
DICOM Conformance Statement — FDR-3000AWS, CR-IR363AWS (Standard) FUJIFILM, doc. 897N201838B	- MWM-SCU propõe somente Implicit VR Little Endian em MWL e MPPS. - Tratamento de status do C-FIND: 0000 Success → itens disponíveis; “qualquer outro status → associação abortada (A-ABORT)”. “O MPPS-SCU cria uma instância MPPS automaticamente quando o usuário seleciona e inicia um item de worklist.” - Tabela de mapeamento Worklist → Imagem → MPPS: o Scheduled Protocol Code Sequence é propagado “From MWL”.
JJ1017 — Diretrizes JAHIS/JIRA (Ver. 1.1 / Ver. 3.x) padrão japonês de códigos de procedimento para RIS↔modalidade	Estrutura de código em partes JJ1017-M (procedimento) e JJ1017-S (subcódigo), transportada em Protocol Context Sequence (0040,0440) — formato adotado pelo console (perfil AWS V4.2 / JJ1017Ver3).
DICOM PS3.3 / PS3.4	Modality Worklist SOP Class; Scheduled Procedure Step Module — Scheduled Protocol Code Sequence (0040,0008) ; Acquisition/Protocol Context — Protocol Context Sequence (0040,0440) .
FUJIFILM CR/DR Console — Manual de Operação série 897N0519	Fluxo de seleção de menu de exposição; tratamento de estudos recebidos via RIS (DICOM MWM) e a relação entre a ordem recebida e o menu de exposição.

Maricá/RJ, 23 de junho de 2026

Dados de paciente omitidos. Documento destinado a subsidiar a análise do serviço técnico FUJIFILM.

Bernardo Almeida
Técnico responsável